



CHIUSURA DELLE FERITE IN MEDICINA VETERINARIA

INDICE

Informazioni tecniche	4
-----------------------	---

Suture consigliate	15
--------------------	----

Suture assorbibili

■ MONOSYN®	16
■ MONOPLUS®	17
■ NOVOSYN®	18
■ NOVOSYN® CHD	19
■ CATGUT CHROM	23

Suture non assorbibili

■ SUPRAMID	20
■ DAFILON®	21
■ SILKAM®	22

Bobine e cassette	23
-------------------	----

Reti chirurgiche	24
------------------	----

Prodotti speciali

■ SUTURATRICI MECCANICHE E LEVAPUNTI	20
■ EMOSTATICI	21
■ MEMBRANE RIASSORBIBILI	22



In B. Braun, **SHARING EXPERTISE** significa sviluppare continuamente soluzioni innovative grazie ad un **DIALOGO** costruttivo con i Clienti, proteggendo e migliorando la **SALUTE** dei pazienti. **INNOVARE** per noi significa ottimizzare e semplificare prodotti e processi, creando migliore flessibilità, serenità e **PERFORMANCE** in specifiche aree terapeutiche. Molto attenti alla **SOSTENIBILITA'**, ci assumiamo sincere **RESPONSABILITA'** dal punto di vista economico, ecologico e sociale nei confronti di Pazienti, Veterinari e nostri Dipendenti, così come per l'**AMBIENTE** in cui vivono e lavorano.

Informazioni tecniche

Portafoglio suture

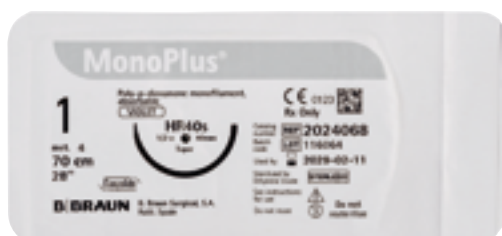
Assorbibili

MONOSYN® – Monofilamento in gliconato, alta tenuta del nodo, di elezione per la chirurgia dei tessuti molli



Struttura	monofilamento	■ Sottocute ■ Intracute ■ Mucose ■ Gastrointestinale ■ Ginecologia ■ Urologia ■ Legature
Materiale	gliconato	
Rivestimento	nessuno	
Calibri USP	6/0 - 1	
Calibri EP	0,7 - 4	
Colore	viola	
Mantenimento forza tensile	14 giorni 50%	
Assorbimento del materiale	60 - 90 giorni	

MONOPLUS® – Monofilamento in polidossanone, caratterizzato da lunga permanenza ed elevata flessibilità



Struttura	monofilamento	■ Parete addominale ■ Ortopedia ■ Traumatologia ■ Fasce ■ Muscoli ■ Chirurgia vascolare
Materiale	polidossanone	
Rivestimento	nessuno	
Calibri USP	7/0 - 2	
Calibri EP	0,5 - 5	
Colore	viola	
Mantenimento forza tensile	35 giorni 50%	
Assorbimento del materiale	180 - 210 giorni	

NOVOSYN® – Intrecciato in acido poliglicolico ed acido lattico (PGLA) ad elevata compatibilità tissutale



Struttura	intrecciata	■ Sottocute ■ Ginecologia ■ Urologia ■ Parete addominale ■ Oftalmologia ■ Legature
Materiale	acido poliglicolico e lattico (PGLA)	
Rivestimento	acido glicolico e lattico + calcio stearato	
Calibri USP	8/0 - 2	
Calibri EP	0,2 - 5	
Colore	viola	
Mantenimento forza tensile	21 giorni 50%	
Assorbimento del materiale	56 - 70 giorni	

NOVOSYN® CHD – Intrecciato in PGLA con rilascio progressivo di clorexidina ad azione battericida



Struttura	intrecciata	■ Gastrointestinale ■ Ginecologia ■ Urologia ■ Legature
Materiale	PGLA + Clorexidina diacetato	
Rivestimento	acido glicolico e lattico + calcio stearato	
Calibri USP	8/0 - 2	
Calibri EP	0,2 - 5	
Colore	viola	
Mantenimento forza tensile	21 giorni 50%	
Assorbimento del materiale	56 - 70 giorni	

CATGUT CHROM – Monofilamento in collagene da intestino bovino di paesi BSE-free, sicuro ed economico



Struttura	monofilamento ritorto	■ Sottocute ■ Legature ovariche ■ Utero
Materiale	collagene purificato	
Rivestimento	trattamento al cromo	
Calibri USP	6/0 - 2	
Calibri EP	0,7 - 5	
Colore	marrone	
Mantenimento forza tensile	14 - 18 giorni 50%	
Assorbimento del materiale	90 - 120 giorni	

Informazioni tecniche

Portafoglio suture

Non Assorbibili

SUPRAMID - Pseudo-monofilamento in poliammide 6.6 con ottima maneggevolezza



Struttura	pseudomonofilamento	■ Cute ■ Fissaggio di drenaggi e cateteri ■ Chirurgia dentale
Materiale	poliammide 6.6	
Rivestimento	nessuno	
Calibri USP	6/0 - 3	
Calibri EP	0,7 - 5	
Colore	nero	

DAFILON® - Monofilamento in poliammide ad alta resistenza ed elasticità



Struttura	monofilamento	■ Cute ■ Legature ovariche ■ Fissaggio di drenaggi e cateteri ■ Oftalmologia
Materiale	poliammide 6.6	
Rivestimento	nessuno	
Calibri USP	11/0 - 1	
Calibri EP	0,1 - 4	
Colore	blu	

SILKAM® - Intrecciato in seta con rivestimento a base di cera, morbido e levigato



Struttura	intrecciata	■ Chirurgia orale ■ Neurochirurgia
Materiale	seta naturale	
Rivestimento	cera e silicone	
Calibri USP	8/0 - 6	
Calibri EP	0,4 - 8	
Colore	nero	

Informazioni tecniche

Suture raccomandate per tipologia di utilizzo

Assorbibili	MONOSYN®	MONOPLUS®	NOVOSYN®	NOVOSYN® CHD
	monofilamento gliconato	monofilamento polidiossane	intrecciato acido poliglicolico e acido lattico (PGLA)	intrecciato PGLA + Clorexidina diacetato
	medio termine 14 giorni 50%	lungo termine 35 giorni 50%	medio termine 21 giorni 50%	medio termine 21 giorni 50%
Cute	++	++	+	+
Sottocute	++	0	++	++
Mucose	++	0	+	+
Intestino tenue	++	++	+	++
Colon	++	++	+	++
Vescica (infetta)	++	++	0	++
Ureteri/Uretra	++	+	0	++
Utero	++	0	+	+
Organi parenchimosi	++	++	0	0
Legature dell'ovaio	++	++	++	++
Legature in generale	++	++	++	++
Muscoli	++	++	++	++
Parete addominale/Linea alba	+	++	+	+
Ernie	-	+	0	0
Fasce	-	++	0	0
Tendini	-	++	-	-
Legamenti	-	++	+	+
Capsule articolari	-	++	+	+
Chirurgia ortopedica	-	++	0	0
Chirurgia vascolare	0	++	-	-
Neurochirurgia	-	+	-	-
Chirurgia orale	++	+	+	+
Rima palpebrale	++	0	++	-
Materiale di riferimento	++ ottimale	+ buono	0 adatto	- non adatto

Informazioni tecniche

Suture raccomandate per tipologia di utilizzo

Non Assorbibili	SUPRAMID	DAFILON®		SILKAM®
	pseudo-monofilamento poliammide 6.6	monofilamento poliammide 6.6		intrecciato seta
Cute	++	++		0
Sottocute	-	-		-
Mucose	++	++		0
Intestino tenue	+	+		0
Colon	+	+		0
Vescica (infetta)	+	+		0
Ureteri/Uretra	+	+		-
Utero	-	-		-
Organi parenchimatosi	0	+		-
Legature dell'ovaio	++	++		0
Legature in generale	++	++		0
Muscoli	+	+		0
Parete addominale/Linea alba	+	+		0
Ernie	++	+		0
Fasce	+	+		0
Tendini	-	+		0
Legamenti	+	+		0
Capsule articolari	+	+		0
Chirurgia ortopedica	+	+		0
Chirurgia vascolare	-	+		0
Neurochirurgia	-	+		++
Chirurgia orale	++	+		++
Rima palpebrale	0	++		0
Materiale di riferimento	++ ottimale	+ buono	0 adatto	- non adatto

Informazioni tecniche

Calibri raccomandati per tipologia di utilizzo

Cani							
USP EP	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Cute							
Sottocute							
Mucose							
Intestino tenue							
Colon							
Vescica (infetta)							
Ureteri/Uretra							
Utero							
Organi parenchimatosi							
Legature dell'ovaio							
Legature in generale							
Muscoli							
Parete addominale/Linea alba							
Ernie							
Fasce							
Tendini							
Legamenti							
Capsule articolari							
Chirurgia ortopedica							
Chirurgia vascolare							
Neurochirurgia							
Chirurgia orale							
Rima palpebrale							

Calibri Raccomandati

Informazioni tecniche

Calibri raccomandati per tipologia di utilizzo

Gatti								
USP EP	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	
Cute								
Sottocute								
Mucose								
Intestino tenue								
Colon								
Vescica (infetta)								
Ureteri/Uretra								
Utero								
Organi parenchimatosi								
Legature dell'ovaio								
Legature in generale								
Muscoli								
Parete addominale/Linea alba								
Ernie								
Fasce								
Tendini								
Legamenti								
Capsule articolari								
Chirurgia ortopedica								
Chirurgia vascolare								
Neurochirurgia								
Chirurgia orale								
Rima palpebrale								

Calibri Raccomandati

AGHI EASYSIDE – Gli aghi speciali atraumatici

ACCIAIO INOX SERIE 300

- Risultato di approfondite ricerche e test clinici

ELEVATA RESISTENZA ALLA PIEGATURA E ROTTURA

- Superficie estremamente levigata
- Il corpo appiattito evita che l'ago ruoti nel portaghi

ESTREMITÀ LAVORATE AL LASER

- Eccellente transizione atraumatica tra ago e filo



Nomenclatura B. Braun

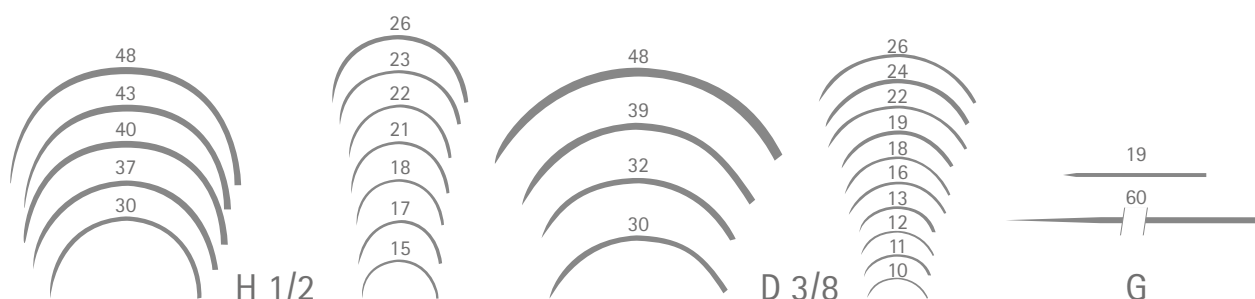
Curvatura dell'ago	Corpo dell'ago	Punta dell'ago	Lunghezza dell'ago	Ulteriori informazioni
S - 1/8 Cerchio	R - Cilindrico	C - Tapercut	La cifra indica la distanza in mm tra la punta dell'ago e la fine dell'ago, misurata sulla curvatura esterna	s - Ago rinforzato
V - 1/4 Cerchio	S - Tagliente	N - Smusso		ss - Ago super rinforzato
D - 3/8 Cerchio	L - Lanceolato	MP - Micropunta di precisione		v - Ago a rottura controllata
H - 1/2 Cerchio	SP - Spatola	m - Micro-ago		
F - 5/8 Cerchio				
G - Dritto				
P - Progressivo				

Esempi

H	R	C	26	s
Esempio 1: HRC 26s = 1/2 Cerchio corpo cilindrico con punta Tapercut, lunghezza 26 mm, ago rinforzato				
D	S	MP	16	
Esempio 2: DSMP 16 = 3/8 Cerchio dorso tagliente con micropunta di precisione, lunghezza 16 mm				
H	S		19	

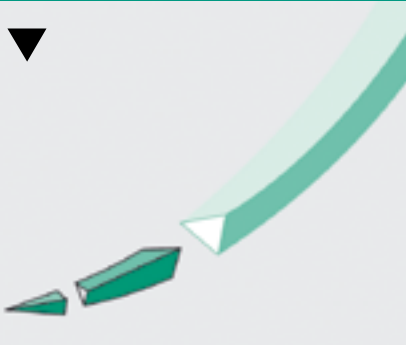
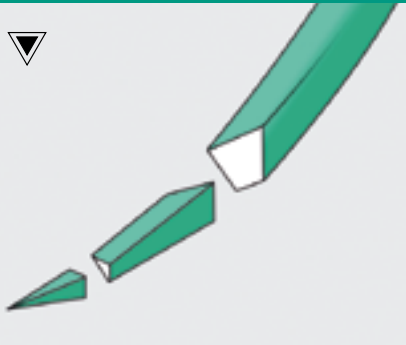
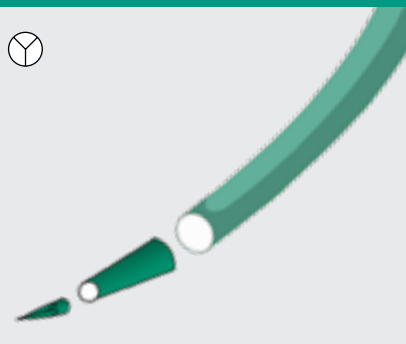
Esempio 3: HS 19 = 1/2 Cerchio dorso tagliente, lunghezza 19 mm

Forme degli aghi (a grandezza naturale)



Informazioni tecniche

Caratteristiche degli aghi

AGHI A DORSO TAGLIENTE		DS HS GS
	Il corpo triangolare con tre lati taglienti è ideale per suturare i tessuti duri. I tre bordi taglienti corrono lungo tutta la lunghezza dell'ago e garantiscono ottime doti di penetrazione e un valido risultato estetico.	
AGHI A DORSO TAGLIENTE CON MICROPUNTA		DSMP
	La punta tagliente di questo sottile ago di precisione è rifinita a mano e permette un'ottima penetrazione con un traumatismo minimo. Il corpo dell'ago è leggermente appiattito per garantire la massima stabilità sul portaghi. Sono aghi per suture di precisione in tessuti duri con risultati estetici assoluti.	
AGHI A CORPO CILINDRICO		DR HR GR
	Il corpo cilindrico dell'ago si affusola in una punta sottile e appuntita. Il corpo si appiattisce nella sezione mediana dell'ago, il che assicura una presa stabile del portaghi. Gli aghi a corpo cilindrico forano il tessuto ma non lo tagliano, per cui sono ideali per suturare i tessuti molli.	
AGHI A CORPO CILINDRICO CON PUNTA TAPERCUT		DRC HRC
	L'ago a corpo cilindrico viene dotato di una punta tagliente sui tre lati. Questa caratteristica permette di perforare i tessuti duri con un traumatismo minimo.	

Informazioni tecniche

Farmacopea

Classificazione dei calibri delle suture

- La classificazione USP (United States Pharmacopoeia) non è direttamente legata al calibro misurabile del filo.
- La classificazione EP (European Pharmacopoeia) è relativa al calibro del filo secondo il sistema metrico. Lo spessore viene espresso in 1/10 mm. Viene dato un limite inferiore, ma il calibro effettivo del filo è di solito maggiore di questo valore (normalmente nel range di tolleranza superiore di ciascun filo).
- Il Catgut Chrom, nella USP Pharmacopoeia, ha una classificazione dei calibri dedicata.

US Pharmacopoeia	European Pharmacopoeia	US Pharmacopoeia	Calibro del filo
Suture assorbibili e non assorbibili	Suture assorbibili e non assorbibili	CATGUT CHROM	Range in mm
USP	EP	USP	mm
11/0	0,1	-	0,010 – 0,019
10/0	0,2	-	0,020 – 0,029
9/0	0,3	-	0,030 – 0,039
8/0	0,4	-	0,040 – 0,049
7/0	0,5	-	0,050 – 0,069
6/0	0,7	7/0	0,070 – 0,099
5/0	1	6/0	0,100 – 0,149
4/0	1,5	5/0	0,150 – 0,199
3/0	2	4/0	0,200 – 0,249
2/0	2,5	3/0	0,250 – 0,299
2/0	3	3/0	0,300 – 0,349
0	3,5	2/0	0,350 – 0,399
1	4	0	0,400 – 0,499
2	5	1	0,500 – 0,599
3 + 4	6	2	0,600 – 0,699
5	7	3	0,700 – 0,799
6	8	4	0,800 – 0,899
7	9	5	0,900 – 0,999
8	10	6	1,000 – 1,099

Informazioni tecniche

Confezionamento

Soluzioni differenti a seconda delle suture



CONFEZIONI DDP (Direct Dispense Packaging)

- Doppia apertura per garantire sterilità del campo operatorio
- Apertura del blister seguendo l'apposita freccia
- Estrazione immediata dell'ago



CONFEZIONI RACEPACK

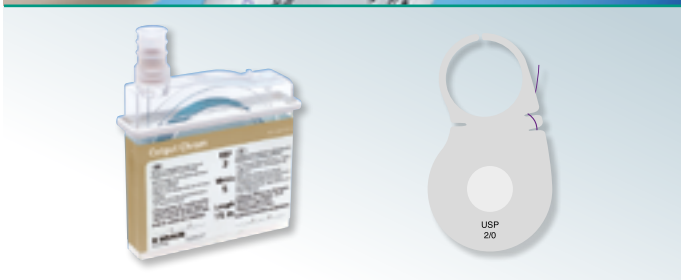


- L'immagazzinamento lineare del filo riduce la memoria
- La parte flessibile del blister agevola l'estrazione dell'ago
- Ampia area di presa sul blister



FILI PRE-TAGLIATI

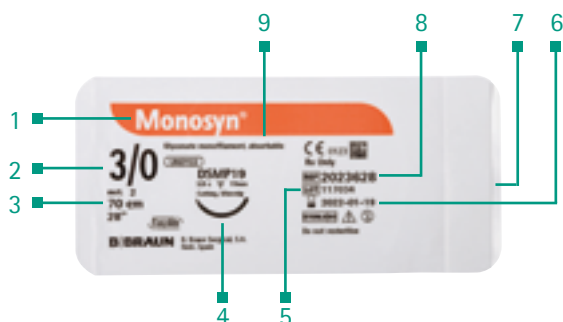
- Di semplice utilizzo per le legature
- Senza nodi e senza inginocchiamenti
- Dispensazione individuale "filo per filo"



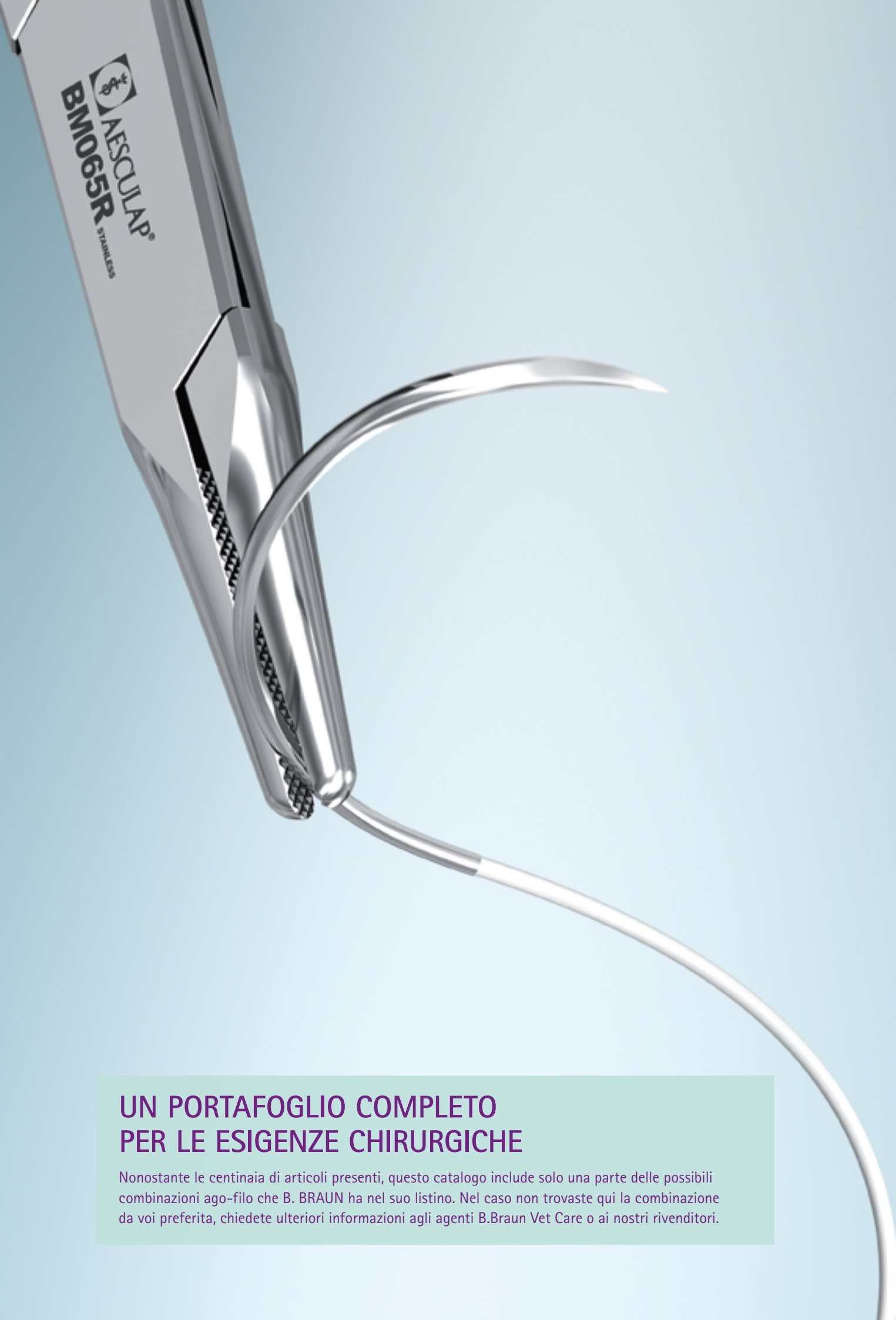
BOBINE E CASSETTE

- Pratiche
- Diverse lunghezze di filo disponibili
- Ottimo rapporto qualità/prezzo

Indicazioni sulle confezioni



- 1 Nome del prodotto
- 2 Calibro del filo (USP/EP)
- 3 Lunghezza del filo
- 4 Descrizione dell'ago e dimensioni a grandezza naturale
- 5 Numero di lotto
- 6 Data di scadenza
- 7 Apertura del blister
- 8 Codice prodotto (C = 36 pz. | B = 24 pz. | G = 12 pz.)
- 9 Descrizione del filo e del materiale



UN PORTAFOGLIO COMPLETO PER LE ESIGENZE CHIRURGICHE

Nonostante le centinaia di articoli presenti, questo catalogo include solo una parte delle possibili combinazioni ago-filo che B. BRAUN ha nel suo listino. Nel caso non trovaste qui la combinazione da voi preferita, chiedete ulteriori informazioni agli agenti B.Braun Vet Care o ai nostri rivenditori.

La sutura ottimale per ogni indicazione

I consigli da B. Braun Vet Care

Indicazioni	Codice*	Caratteristiche
 Chirurgia dei tessuti molli Organi parenchimatosi	C2022014 / G2022014	Monosyn® viola USP 4/0, filo: 70cm, ago: HR22, Confezione Racepack
	C2022025 / G2022025	Monosyn® viola USP 3/0, filo: 70cm, ago: HR26, Confezione Racepack
	C2022036 / G2022036	Monosyn® viola USP 2/0, filo: 70cm, ago: HR30, Confezione Racepack
 Sottocute	C2022204 / G2022204	Monosyn® viola USP 4/0, filo: 70cm, ago: DS19, Confezione Racepack
	C2022215 / G2022215	Monosyn® viola USP 3/0, filo: 70cm, ago: DS24, Confezione Racepack
	C0068420N1	Novosyn® viola USP 4/0, filo: 70cm, ago: DS19, Confezione Racepack
	C0068235N1 / G0068235N1	Novosyn® viola USP 3/0, filo: 70cm, ago: DS24, Confezione Racepack
 Legature in generale	C0058409	Novosyn® viola USP 1, filo: 2 x 70cm
 Parete addominale Linea Alba	C2024037 / G2024037	MonoPlus® viola USP 0, filo: 70cm, ago: HR30, Confezione Racepack
	C2024058 / G2024058	MonoPlus® viola USP 1, filo: 70cm, ago: HR37S, Confezione Racepack
 Cute	C0935204 / G0935204	Dafilon® blu USP 4/0, filo: 75cm, ago: DS19
	C0935352 / G0935352	Dafilon® blu USP 3/0, filo: 75cm, ago: DS24
 Rima palpebrale	C2022204 / G2022204	Monosyn® viola USP 4/0, filo: 70cm, ago: DS19, Confezione Racepack
 Ernie	C0712426	Supramid nero USP 2/0, filo: 75cm, ago: HS26
 Otoematoma	C0932655 / G0932655	Dafilon® blu USP 3/0, filo: 75cm, ago: GS60
 Capsule articolari	C0024131	MonoPlus® viola USP 2/0, filo: 70cm, ago: HR17S
 Chirurgia orale	C0760137 / G0760137	Silkam® nero USP 4/0, filo: 75cm, ago: HR17

Suture assorbibili



EasySlide

Monosyn® | 14 giorni 50%

Monofilamento in gliconato, alta tenuta del nodo, di elezione per la chirurgia dei tessuti molli



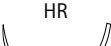
Codici ad inizio C20: Racepack

Indicazioni

- Sottocute
- Intracute
- Mucose
- Gastrointestinale
- Ginecologia
- Urologia
- Legature

Controindicazioni

Tipologie di utilizzo che richiedano tenuta prolungata tramite inserimento di suture a lungo assorbimento o non assorbibili.

MONOSYN®				USP EP								
Ago Curvatura & Corpo		Ago (mm)	Filo (cm)	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	
3/8 Cerchio Cilindrico		22	70			C0022110	C2022100					
		26	70				C2022117	C0022118				
3/8 Cerchio Cilindrico Punta Tapercut		12	70	C0022392	C0022403							
		22	70			C2022354	C2022355					
		26	70					C2022366				
3/8 Cerchio Dorso Tagliente		12	45	C0022102	C0022103	C0022104						
		16	45			C2022419	C0022420	C0022421				
		19	45			C0022504	C0022505					
		19	70			C2022204*	C2022205					
		24	45			C0022115						
		24	70			C2022214	C2022215*	C2022216	C0022217			
		30	70					C2022231	C2022232	C0022233		
1/2 Cerchio Cilindrico		13	70	C0022007	C2022008							
		17	70	C0022002	C2022003	C2022004	C2022005					
		22	70			C2022014*	C2022015	C2022016				
		26	70			C2022024	C2022025*	C2022026	C2022027	C0022028		
		26s	70			C0022084	C0022085	C0022086	C0022087	C0022088	C0022089	
		30	70					C2022035	C2022036*	C2022037	C0022038	
		37	70					C2022045	C2022046	C2022047	C2022048	C0022049
		40s	70					C0022066	C2022067	C2022068	C0022069	
1/2 Cerchio Cilindrico Punta Tapercut		26	70			C2022305	C2022306					
1/2 Cerchio Dorso Tagliente		26	70			C2022236	C2022237					
		26s	70			C0022241	C2022242	C2022243				
		37s	70					C0022247	C0022248	C0022249		
Fili Pre-tagliati		-	3x45			C0020005	C0020006	C0020007	C0020008			

* Disponibile anche in versione G da 12pz

Suture assorbibili



Easyslide

Monoplus® | 35 giorni 50%

Monofilamento in polidiossانونe, caratterizzato da lunga permanenza ed elevata flessibilità



Codici ad inizio C20: Racepack

Indicazioni

- Parete addominale
- Ortopedia
- Traumatologia
- Fasce
- Muscoli
- Chirurgia vascolare

Controindicazioni

Tipologie di utilizzo che richiedano tenuta prolungata tramite inserimento di suture non assorbibili.

MONOPLUS®						USP EP				
Ago Curvatura Et Corpo	Ago (mm)	Filo (cm)	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 Cerchio Cilindrico Punta Tapercut		12	70	C0024232	C0024233					
		19	70		C0024175	C2024536	C0024519			
		24	70			C0024541	C2024520	C2024990		
3/8 Cerchio Dorso Tagliente		30	70				C0024991	C0024992	C0024598	
		17	70	C0024012	C0024013	C0024014	C0024015			
		17s	70					C0024131		
		22	70	C0024133	C2024134	C2024135	C0024136			
		26	70		C2024024	C2024025	C2024026	C2024027		
		26s	70			C0024085	C0024086	C0024087	C0024088	
1/2 Cerchio Cilindrico		30	70		C2024034	C2024035	C2024036	C2024037*	C0024038	
		37s	70			C0024055	C2024056	C2024057	C2024058*	
		40s	90					C2024467	C2024468	B0024469
		43s	90					C0024401	C0024402	
		48	90					B0024077	C2024078	B0024079
1/2 Cerchio Cilindrico Punta Tapercut		26	70		C0024498	C2024305	C2024306			
		23ss	70						C0024108	
		26s	70			C0024185	C2024186	C2024187	C0024188	
1/2 Cerchio Cilindrico Dorso Tagliente		37	90				C0024104	C0024105	C0024106	
		37s	70				C0024156	C0024157	C0024158	
		40	90					C0024117	C0024118	
		48	90					C0024127	C0024128	
Fili Pre-tagliati		-	2x70						C0044205	

* Disponibile anche in versione G da 12pz

Suture assorbibili



EasySlide

Novosyn® | 21 giorni 50%

Intrecciato in acido poliglicolico ed acido lattico (PGLA) ad elevata compatibilità tissutale



Codici a finale N1: Racepack

Indicazioni

- Sottocute
- Ginecologia
- Urologia
- Parete addominale
- Oftalmologia
- Legature

Controindicazioni

Chirurgia cardiovascolare e utilizzi che richiedano tenuta prolungata tramite inserimento di suture a lungo assorbimento, non assorbibili o monofilamento.

NOVOSYN®						USP EP				
Ago Curvatura & Corpo	Ago (mm)	Filo (cm)	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 Cerchio Dorso Tagliente 	12	45	C0068206	C0068207	C0068208					
	16	45		C0068212	C0068213	C0068214				
	19	70		C0068419	C0068420N1	C0068421N1	C0068422N1			
	24	70			C0068234N1	C0068235N1*	C0068236N1	C0068237N1		
	30	70				C0068246N1	C0068247N1	C0068248N1	C0068249	
	35	70								C0068259
1/2 Cerchio Cilindrico 	17	70	C0068011	C0068012	C0068013	C0068014	C0068015			
	22	70			C0068029N1	C0068030N1	C0068031N1	C0068032		
	26	70			C0068040N1	C0068041N1	C0068042N1	C0068043N1	C0068044N1	
	26s	70				C0068089N1	C0068090N1	C0068091N1	C0068092N1	C0068093
	30	70				C0068046N1	C0068047N1	C0068048N1	C0068049N1	
	37	70					C0068051N1	C0068052N1	C0068053N1	
	40s	90						C0068556N1	C0068557N1	B0068558
	48	70				C0068099	C0068060N1	C0068061N1	C0068062N1	C0068063
1/2 Cerchio Cilindrico Punta Tapercut 	17	70		C0068312	C0068313	C0068314	C0068315	C0068316		
	26	70				C0068335N1	C0068336N1	C0068343		
	21	45			C0068225	C0068226				
1/2 Cerchio Dorso Tagliente 	23	70				C0068430	C0068431	C0068432		C0068429
	26	70				C0068241	C0068242	C0068243		
	26s	70					C0068290N1	C0068291N1		
	30	70					C0068251N1	C0068252N1	C0068253	
	37s	70					C0068294N1	C0068296N1	C0068297N1	C0068298
	40s	70					C0068267	C0068268N1	C0068269N1	C0068770
	-	140			C0058204	C0058205	C0058207	C0058208	C0058209	C0058210
	-	2X70			C0058404	C0058405	C0058406	C0058407	C0058409	C0058410
Fili Pre-tagliati	-	3x45			C0058624	C0058625	C0058626	C0058627	C0058629	C0058630

* Disponibile anche in versione G da 12pz

Suture assorbibili



Novosyn® CHD | 21 giorni 50%

Intrecciato in PGLA con rilascio progressivo di clorexidina ad azione batteric



Indicazioni

- Gastrointestinale
- Ginecologia
- Urologia
- Legature

Controindicazioni

- Oftalmologia
- Chirurgia dell'orecchio
- Chirurgia cardiovascolare
- Neurochirurgia

NOVOSYN® CHD

USP
EP

Ago Curvatura Et Corpo	Ago (mm)	Filo (cm)	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 Cerchio Dorso Tagliente	12	70	C1068508							
	16	70	C1068512 C1068513 C1068514							
	19	70	C1068419 C1068420 C1068421 C1068422							
	24	70	C1068234 C1068235 C1068236 C1068237							
	30	70	C1068246 C1068247 C1068248 C1068249							
1/2 Cerchio Cilindrico	13	70	C1068007 C1068008							
	17	70	C1068012 C1068013 C1068014 C1068015							
	22	70	C1068029 C1068030 C1068031							
	26	70	C1068039 C1068040 C1068041 C1068042 C1068043 C1068044							
	30	70	C1068046 C1068047 C1068048 C1068049 C1068045							
	37	70	C1068050 C1068051 C1068052 C1068053 C1068054							
1/2 Cerchio Dorso Tagliente	43	70	C1068947 C1068948							
	21	45	C1068225							
	23	70	C1068430 C1068431							
	26	70	C1068241 C1068242 C1068243							
	30	70	C1068251 C1068252 C1068253							
Fili Pre-tagliati	37	90	C1068494 C1068495							
	-	140	C1058204 C1058205 C1058207 C1058208 C1058209 C1058210							

Suture non assorbibili



Supramid

Pseudo-monofilamento in poliammide 6.6 con ottima maneggevolezza



Indicazioni

- Cute
- Fissaggio di drenaggi e cateteri
- Chirurgia dentale

Controindicazioni

Tipologie di utilizzo che richiedano tenuta a lungo termine (superiore a 2 anni).

SUPRAMID			USP EP							
Ago Curvatura Et Corpo	Ago (mm)	Filo (cm)	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 Cerchio Dorso Tagliente	DS	12	45	C0712078	C0712086					
		16	45	C0712124	C0714135					
		19	45	C0712191	C0712205	C0712213	C0712221			
		19	75		C0714208	C0714216				
		24	45		C0712345	C0712353	C0712361	C0712370		
		24	75			C0714356	C0714364	C0714372		
		30	45			C0712469	C0712477	C0712485	C0712493	
		30	75					C0714488		
		39	75			C0712540	C0712558	C0712566	C0712574	
1/2 Cerchio Cilindrico Punta Tapercut	HRC	17	75		C0710149					
1/2 Cerchio Dorso Tagliente	HS	15	45	C0712035	C0712043	C0712051				
		21	45	C0712248	C0712256	C0712264				
		23	45			C0712302				
		26	75			C0712418	C0712426	C0712434		
Fili Pre-tagliati	-	150					C0212067	C0212075	C0212091	C0212105

Suture non assorbibili



Dafilon®

Monofilamento in poliammide ad alta resistenza ed elasticità

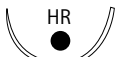


Indicazioni

- Cute
- Legature ovariche
- Fissaggio di drenaggi e cateteri
- Oftalmologia

Controindicazioni

Tipologie di utilizzo che richiedono tenuta prolungata tramite inserimento di suture a lungo assorbimento o non assorbibili.

DAFILON®			USP EP							
Ago Curvatura & Corpo	Ago (mm)	Filo (cm)	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 Cerchio Dorso Tagliente 	12	45	C0932060	C0932078						
	16	45	C0932116	C0932124	C0932132	C0932140				
	19	45		C0932191	C0932205	C0932213				
	19	75		C0935190	C0935204*	C0933252				
	24	75			C0935344	C0935352*	C0935360			
	30	75				C0935468	C0935476	C0935484	C0935492	
	39	75						C0932566		
1/2 Cerchio Cilindrico 	22	75			C0930210					
	26	75					C0930423	C0930431		
	30	75					C0930474	C0930482	C0930490	
	37	75				C0930701				
	40	75						C0930539		
1/2 Cerchio Dorso Tagliente 	15	75			C0932507					
	21	75					C0932873			
	26	90				C0932957	C0934968			
	30	75							C0935034	
	48	75							C0932620	
Dritto Dorso Tagliente 	51	90							C0935573	
	60	75				C0932655*	C0932663			
Fili Pre-tagliati	-	150				C0432059	C0432067			

* Disponibile anche in versione G da 12pz

Suture non assorbibili



Silkam®

Intrecciato in seta con rivestimento a base di cera, morbido e levigato



Indicazioni

- Chirurgia dentale
- Chirurgia vascolare

Controindicazioni

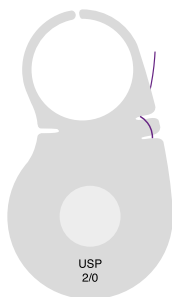
Tipologie di utilizzo che richiedano tenuta a lungo termine.

SILKAM®			USP EP							
Ago Curvatura Et Corpo	Ago (mm)	Filo (cm)	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 Cerchio Cilindrico	DR	15		C0761147	C0765767		C0761150			
		18		C0761192	C0761206	C0761214				
		22				C0761311	C0761273			
		32				C0761460	C0761478	C0761476	C0761494	C0761508
3/8 Cerchio Dorso Tagliente	DS	12	C0762067	C0762075	C0762083	C0762091				
		16	C0762113	C0762121	C0762130	C0762148				
		19		C0762199	C0762202	C0762210	C0762229			
		19		C0765198	C0765201	C0765210	C0765228			
		24				C0762350	C0762369	C0762377		
		30				C0762466	C0762474	C0762482	C0762490	C0762504
		39					C0762598	C0762601	C0762610	C0762628
1/2 Cerchio Cilindrico	HR	13			C0764086	C0764094				
		17		C0760129	C0760137*	C0760145	C0760153			
		20				C0760235	C0760242			
		22			C0760293	C0760307	C0760315			
		26			C0760404	C0760412	C0760420	C0760439	C0760447	
		30				C0760463	C0760471	C0760480	C0760498	
		37				C0760501	C0760510	C0760528	C0760536	C0760544
1/2 Cerchio Dorso Tagliente	HS	15		C0762032	C0762040	C0762059				
		18				C0762547				
		21		C0762245	C0762253	C0762261				
		23				C0762300				
		26			C0762407	C0762415	C0762423	C0762431		
		30					C0764779	C0764620	C0764647	C0764698
Fili Pre-tagliati	-	150			C0262048	C0262056	C0262064	C0262072	C0262099	C0262102

* Disponibile anche in versione G da 12pz

Suture assorbibili e non assorbibili

Bobine e cassette



- Pratiche
- Ottimo rapporto qualità prezzo
- Diverse lunghezze di filo disponibili

USP EP	Lungh. (m)	4/0 1,5	3/0 2	2/0 2,5	0 3,5	1 4	2 5	3 - 4 6	5 7	6 8
Assorbibili										
MONOSYN® 14 giorni 50%										
Bobina	0,25			G0020046	G0020047	G0020048				
MONOPLUS® 35 giorni 50%										
Cassetta	25	F0024270	F0024271	F0024272	F0024273	F0024274	F0024275			
NOVOSYN® CHD 21 giorni 50%										
Bobina	0,25		G1058715	G1058716	G1058717	G1058719	G1058720			
NOVOSYN® 21 giorni 50%										
Bobina	0,25		G0058715	G0058716	G0058717	G0058719	G0058720			
CATGUT CHROM* 14 - 16 giorni 50%										
Cassetta	100	F1154036	F1154044	F1154052						
	75				F1154060	F1154079				
	50						F1154087	F1154095		
	25							F1154109	F1154117	F1154125
Non assorbibili										
SUPRAMID										
Cassetta	100	F1194038	F1194046	F1194054						
	75				F1194062	F1194070				
	50						F1194089	F1194097		
	25									F1194119
DAFILON®										
Cassetta	100	F1934040	F1934058	F1934066	F1934074					
	75					F1934082	F1934090			

*Per i calibri in mm fare riferimento alla tabella di pag. 12

Reti chirurgiche

Assorbibili ed elastiche

SAFIL® MESH



Safil® Mesh è costituita da un omopolimero sintetico assorbibile di acido poliglicolico.

Safil® Mesh è tessuta con filamenti non rivestiti e incolori della stessa composizione della sutura Safil®.

Durante l'assorbimento il materiale causa solo lieve reazione tissutale; è inerte, non antigenica né pirogenica.

Indicazioni

- Supporto temporaneo di ferite ed organi
- Rinforzo della chiusura dei difetti di parete nella regione addominale e nella gabbia toracica

Vantaggi

- Rete molto elastica e maneggevole
- Assorbimento completo dopo 60 - 90 giorni
- Struttura macroporosa
- Allungamento omogeneo in direzione longitudinale e trasversale
- Supporto forte e buona tenuta della sutura
- Lieve reazione tissutale
- Basso rischio di reazioni infiammatorie secondarie

Caratteristiche

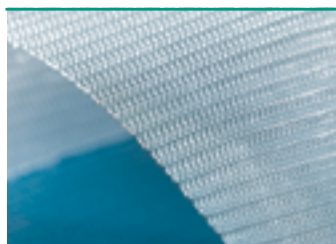
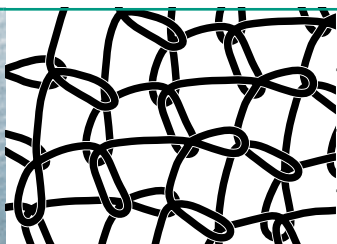
Struttura	Rete in plurifilamento, assorbibile
Composizione chimica	Acido poliglicolico
Colore	Bianco / Incolore
Peso	56 g/m ²
Porosità	0,75 mm
Tecniche di nodo	5 mm dal bordo della rete con suture assorbibili

Trama	Dimensioni (cm)	Confezione	Codice
	8 x 12	3	1065508
	15 x 25	1	1065504
	18 x 28	1	1065503
	15 x 15	1	1065501
	30 x 30	1	1065500

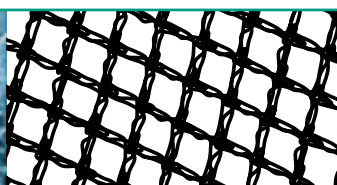
Reti chirurgiche

Non assorbibili

PREMILENE® MESH	
Struttura	Rete in monofilamento, non assorbibile
Composizione chimica	Polipropilene
Colore	Incolore
Peso	82 g/m ²
Porosità	0,8 mm
Spessore	0,48 mm
Indicazioni	- Ernioplastiche - Chirurgia ricostruttiva
Controindicazioni	Regioni infette
Tecniche di nodo	6,5 - 12,5 mm dal bordo della rete con suture non assorbibili

Prodotto	Trama	Dimensioni (cm)	Confezione	Codice
		5 x 10	1	1064315UNI
		7,5 x 15	1	1064425UNI
		15 x 15	1	1064435UNI
		30 x 30	1	1064455UNI

OPTILENE® MESH	
Struttura	Rete in monofilamento, non assorbibile
Composizione chimica	Polipropilene
Colore	Incolore - Blu
Peso	60 g/m ²
Porosità	1,5 mm
Spessore	0,53 mm
Indicazioni	- Ernioplastica - Chirurgia ricostruttiva
Controindicazioni	Regioni infette
Tecniche di nodo	6,5 - 12,5 mm dal bordo della rete con suture non assorbibili

Prodotto	Trama	Dimensioni (cm)	Confezione	Codice
		5 x 10	5	1065020
		10 x 15	5	1065040
		20 x 30	5	1065160

Prodotti speciali

Suturatrici meccaniche e levapunti

MANIPLER® – Suturatrici meccaniche cutanee a 35 graffette

Manipler AZ e ADVAN sono suturatrici meccaniche sterili monouso progettate per applicare 35 clips in acciaio inossidabile al termine di ogni tipo di operazione chirurgica. Offrono una presa affidabile riducendo così il rischio per il paziente.

Indicazioni

Le suturatrici meccaniche B. Braun possono essere usate per l'abituale chiusura di ferite in un'ampia varietà di specialità chirurgiche.

Vantaggi

- Progettazione di alta qualità
- Peso ben bilanciato e design ergonomico
- Angolo di posizionamento flessibile
- Indicatore di allineamento

Prodotto	Graffetta	Confezione	Codice
MANIPLER® AZ	 Rivestita in Teflon	6	783100
MANIPLER® ADVAN		5	783106

LEVAPUNTI MONOUSO E PLURIUSO

I levapunti monouso e pluriuso sono progettati per fornire una rapida e facile rimozione di tutti i tipi di punti chirurgici in modo atermico.

Prodotto	Confezione	Codice
LEVAPUNTI MONOUSO	20	783104
LEVAPUNTI PLURIUSO	1	783102

Prodotti speciali

Emostatici

HISTOACRYL® – Adesivo tissutale chirurgico a base di enbucrilato (n-butil-2 cianoacrilato)

Adesivo tissutale chirurgico per la chiusura senza sutura di piccole ferite cutanee che non siano sotto tensione.

- Eccellente risultato cosmetico
- Elevata tenuta meccanica
- Senza necessità di anestesia
- Si evitano ulteriori traumi (canali di sutura)
- Rapida tempistica di trattamento
- Forma un film protettivo contro i batteri



Prodotto	Formato	Confezione	Codice
HISTOACRYL® BLU	pipetta da 0,5 ml	5	1050052
HISTOACRYL® INCOLORE	pipetta da 0,5 ml	5	1050060

LYOSTYPT® – Feltro in collagene assorbibile deantigenizzato, composto da fibrine di origine bovina

Feltro in collagene assorbibile deantigenizzato, composto da fibrine di origine bovina

- Emostasi veloce ed efficace (Tempo medio 2 minuti e 20 secondi)
- Alto assorbimento
- Utilizzabile endoscopicamente
- Compatibile con adesivi di fibrina e antibiotici
- Non aderisce a guanti e strumenti



Dimensioni	Confezione	Codice
3 X 5 cm	12	1069128
5 X 8 cm	6	1069152
10 X 12 cm	4	1069209

CERA PER OSSA® – Barrette in cera d'api e vaselina sintetica

Barrette in cera d'api (70%) e vaselina sintetica (30%) facile da modellare e applicare. Per applicazioni sull'osso in:

- Neurochirurgia
- Traumatologia e ortopedia
- Chirurgia toracica
- Odontoiatria



Prodotto	Confezione	Codice
CERA PER OSSA	24	1029754

Prodotti speciali

Membrane riassorbibili

LYOPLANT® E LYOPLANT® ONLAY – Membrane in pericardio bovino per rigenerazione ossea



Membrane in puro collagene da pericardio bovino purificato, con ridotta propensione alle reazioni immunologiche. Vengono indicate per la sostituzione della dura in interventi intracraniali ed intraspanali.

- Lyoplant® viene lentamente degradato per via enzimatica e viene sostituito dal tessuto connettivo endogeno. Il particolare processo di preparazione, che prevede una liofilizzazione delicata, garantisce che Lyoplant® conservi la sua struttura fibrosa lassa, e questo offre condizioni di cicatrizzazione ideali dopo l'impianto. Come tutti i prodotti a base di collagene, il periodo di assorbimento subisce delle variazioni a seconda della quantità di prodotto utilizzato e dal sito di applicazione
- Lyoplant® Onlay, oltre alle caratteristiche proprie di Lyoplant®, può essere utilizzato anche come impianto autoadesivo. Infatti può essere applicato steso o, dietro richiesta e valutazione dell'utilizzatore, ulteriormente suturato.

Caratteristiche di LYOPLANT® e LYOPLANT® ONLAY

- Impermeabili ai fluidi per evitare perdite del liquido cefalo-rachidiano
- Eccellente tollerabilità tissutale
- Ottime qualità di modellamento ed elasticità
- Non si staccano dalla sutura

Prodotto	Dimensioni	Confezione	Codice
LYOPLANT®	1,5 x 3 cm	2	1066102
LYOPLANT®	4 x 5 cm	2	1066064
LYOPLANT®	6 x 8 cm	1	1066242
LYOPLANT® ONLAY	2,5 x 2,5 cm	1	1067010
LYOPLANT® ONLAY	5 x 5 cm	1	1067020
LYOPLANT® ONLAY	7,5 x 7,5 cm	1	1067040

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
783100	26	C0024106	17	C0068063	18	C0262102	22
783102	26	C0024108	17	C0068089N1	18	C0432059	21
783104	26	C0024117	17	C0068090N1	18	C0432067	21
783106	26	C0024118	17	C0068091N1	18	C0710149	20
1029754	27	C0024127	17	C0068092N1	18	C0712035	20
1050052	27	C0024128	17	C0068093	18	C0712043	20
1050060	27	C0024131	17	C0068099	18	C0712051	20
1065020	25	C0024133	17	C0068206	18	C0712078	20
1065040	25	C0024136	17	C0068207	18	C0712086	20
1065160	25	C0024156	17	C0068208	18	C0712124	20
1065500	24	C0024157	17	C0068212	18	C0712191	20
1065501	24	C0024158	17	C0068213	18	C0712205	20
1065503	24	C0024175	17	C0068214	18	C0712213	20
1065504	24	C0024188	17	C0068225	18	C0712221	20
1065508	24	C0024232	17	C0068226	18	C0712248	20
1066064	28	C0024233	17	C0068234N1	18	C0712256	20
1066102	28	C0024401	17	C0068235N1	18	C0712264	20
1066242	28	C0024402	17	C0068236N1	18	C0712302	20
1067010	28	C0024498	17	C0068237N1	18	C0712345	20
1067020	28	C0024519	17	C0068241N1	18	C0712353	20
1067040	28	C0024541	17	C0068242N1	18	C0712361	20
1069128	27	C0024598	17	C0068243	18	C0712370	20
1069152	27	C0024991	17	C0068246N1	18	C0712418	20
1069209	27	C0024992	17	C0068247N1	18	C0712426	20
1064315UNI	25	C0044205	17	C0068248N1	18	C0712434	20
1064425UNI	25	C0058204	18	C0068249	18	C0712469	20
1064435UNI	25	C0058205	18	C0068251N1	18	C0712477	20
1064455UNI	25	C0058207	18	C0068252N1	18	C0712485	20
B0024077	17	C0058208	18	C0068253	18	C0712493	20
B0024079	17	C0058209	18	C0068259	18	C0712540	20
B0024469	17	C0058210	18	C0068267	18	C0712558	20
B0068558	18	C0058404	18	C0068268N1	18	C0712566	20
C0020005	16	C0058405	18	C0068269N1	18	C0712574	20
C0020006	16	C0058406	18	C0068290N1	18	C0714135	20
C0020007	16	C0058407	18	C0068291N1	18	C0714208	20
C0020008	16	C0058409	18	C0068294N1	18	C0714216	20
C0022007	16	C0058410	18	C0068296N1	18	C0714356	20
C0022028	16	C0058624	18	C0068297N1	18	C0714364	20
C0022038	16	C0058625	18	C0068298	18	C0714372	20
C0022049	16	C0058626	18	C0068312	18	C0714488	20
C0022066	16	C0058627	18	C0068313	18	C0760129	22
C0022069	16	C0058629	18	C0068314	18	C0760137	22
C0022084	16	C0058630	18	C0068315	18	C0760145	22
C0022085	16	C0068011	18	C0068316	18	C0760153	22
C0022087	16	C0068012	18	C0068335N1	18	C0760235	22
C0022088	16	C0068013	18	C0068336N1	18	C0760242	22
C0022089	16	C0068014	18	C0068343	18	C0760293	22
C0022102	16	C0068015	18	C0068419	18	C0760307	22
C0022103	16	C0068029N1	18	C0068420N1	18	C0760315	22
C0022104	16	C0068030N1	18	C0068421N1	18	C0760404	22
C0022110	16	C0068031N1	18	C0068422N1	18	C0760412	22
C0022115	16	C0068032	18	C0068429	18	C0760420	22
C0022241	16	C0068040N1	18	C0068430N1	18	C0760439	22
C0022392	16	C0068041N1	18	C0068431N1	18	C0760447	22
C0022403	16	C0068042N1	18	C0068432	18	C0760463	22
C0022420	16	C0068043N1	18	C0068556N1	18	C0760471	22
C0022421	16	C0068044N1	18	C0068557N1	18	C0760480	22
C0022504	16	C0068046N1	18	C0068770	18	C0760498	22
C0022505	16	C0068047N1	18	C0212067	20	C0760501	22
C0024012	17	C0068048N1	18	C0212075	20	C0760510	22
C0024013	17	C0068049N1	18	C0212091	20	C0760528	22
C0024014	17	C0068051N1	18	C0212105	20	C0760536	22
C0024015	17	C0068052N1	18	C0262048	22	C0760544	22
C0024038	17	C0068053N1	18	C0262056	22	C0761147	22
C0024055	17	C0068060N1	18	C0262064	22	C0761150	22
C0024104	17	C0068061N1	18	C0262072	22	C0761192	22
C0024105	17	C0068062N1	18	C0262099	22	C0761206	22

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
C0761214	22	C0932140	21	C1068252	19	C2024034	17
C0761273	22	C0932191	21	C1068253	19	C2024035	17
C0761311	22	C0932205	21	C1068419	19	C2024036	17
C0761460	22	C0932213	21	C1068420	19	C2024037	17
C0761476	22	C0932507	21	C1068421	19	C2024056	17
C0761478	22	C0932566	21	C1068422	19	C2024057	17
C0761494	22	C0932620	21	C1068430	19	C2024058	17
C0761508	22	C0932655	21	C1068431	19	C2024078	17
C0762032	22	C0932663	21	C1068494	19	C2024134	17
C0762040	22	C0932873	21	C1068495	19	C2024135	17
C0762059	22	C0932957	21	C1068508	19	C2024186	17
C0762067	22	C0934968	21	C1068512	19	C2024187	17
C0762075	22	C0935034	21	C1068513	19	C2024305	17
C0762083	22	C0935190	21	C1068514	19	C2024306	17
C0762091	22	C0935204	21	C1068947	19	C2024467	17
C0762113	22	C0935344	21	C1068948	19	C2024468	17
C0762121	22	C0935352	21	C2022002	16	C2024520	17
C0762130	22	C0935360	21	C2022003	16	C2024536	17
C0762148	22	C0935468	21	C2022004	16	C2024990	17
C0762199	22	C0935476	21	C2022005	16	F0024270	23
C0762202	22	C0935484	21	C2022008	16	F0024271	23
C0762210	22	C0935492	21	C2022014	16	F0024272	23
C0762229	22	C0935573	21	C2022015	16	F0024273	23
C0762253	22	C1058204	19	C2022016	16	F0024274	23
C0762261	22	C1058205	19	C2022024	16	F0024275	23
C0762300	22	C1058207	19	C2022025	16	F1154036	23
C0762350	22	C1058208	19	C2022026	16	F1154044	23
C0762369	22	C1058209	19	C2022027	16	F1154052	23
C0762377	22	C1058210	19	C2022035	16	F1154060	23
C0762407	22	C1068007	19	C2022036	16	F1154079	23
C0762415	22	C1068008	19	C2022037	16	F1154087	23
C0762423	22	C1068012	19	C2022045	16	F1154095	23
C0762431	22	C1068013	19	C2022046	16	F1154109	23
C0762466	22	C1068014	19	C2022047	16	F1154117	23
C0762474	22	C1068015	19	C2022048	16	F1154125	23
C0762482	22	C1068029	19	C2022067	16	F1194038	23
C0762490	22	C1068030	19	C2022068	16	F1194046	23
C0762504	22	C1068031	19	C2022086	16	F1194054	23
C0762547	22	C1068039	19	C2022100	16	F1194062	23
C0762598	22	C1068040	19	C2022117	16	F1194070	23
C0762601	22	C1068041	19	C2022118	16	F1194089	23
C0762610	22	C1068042	19	C2022204	16	F1194097	23
C0762628	22	C1068043	19	C2022205	16	F1194119	23
C0764086	22	C1068044	19	C2022214	16	F1934040	23
C0764094	22	C1068045	19	C2022215	16	F1934058	23
C0764620	22	C1068046	19	C2022216	16	F1934066	23
C0764647	22	C1068047	19	C2022217	16	F1934074	23
C0764698	22	C1068048	19	C2022231	16	F1934082	23
C0764779	22	C1068049	19	C2022232	16	F1934090	23
C0765198	22	C1068050	19	C2022233	16	G0020046	23
C0765201	22	C1068051	19	C2022236	16	G0020047	23
C0765210	22	C1068052	19	C2022237	16	G0020048	23
C0765228	22	C1068053	19	C2022242	16	G0058715	23
C0765767	22	C1068054	19	C2022243	16	G0058716	23
C0930210	21	C1068225	19	C2022247	16	G0058717	23
C0930423	21	C1068234	19	C2022248	16	G0058719	23
C0930431	21	C1068235	19	C2022249	16	G0058720	23
C0930474	21	C1068236	19	C2022305	16	G0068235N1	18
C0930482	21	C1068237	19	C2022306	16	G0760137	22
C0930490	21	C1068241	19	C2022354	16	G0932655	21
C0930539	21	C1068242	19	C2022355	16	G0935204	21
C0930701	21	C1068243	19	C2022366	16	G0935352	21
C0932060	21	C1068246	19	C2022419	16	G2022014	16
C0932078	21	C1068247	19	C2024024	17	G2022025	16
C0932116	21	C1068248	19	C2024025	17	G2022036	16
C0932124	21	C1068249	19	C2024026	17	G2022204	16
C0932132	21	C1068251	19	C2024027	17	G2022215	16

AESULAP® – a B. Braun brand



B. Braun Milano S.p.A. | Via Vincenzo da Seregno, 14 | 20161 Milano
Tel. 02 662181 | Fax 02 66218.357

Visitate il nostro sito web selezionando il link sottostante o inquadrando il QR Code a lato.

www.bbraun.it/veterinaria



Visionate il nostro portale di training suture al link sottostante o inquadrando il QR Code a lato.

www.bbraun-vetcare.com/suturetraining

